



Sistema de fijación externa temporal

✓ *Intuitivo*

✓ *Rápido*

✓ *Versátil*



MR Conditional

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma


Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.

SET QUIRÚRGICO

CON TORNILLOS ESTÁNDAR CON ROSCA UNIFORME PARA DISTINTAS APLICACIONES

PK-020 | Set quirúrgico U-Rod Dolphix con tornillos óseos Estándar de $\varnothing 5\text{mm}$

U SET
PK-020

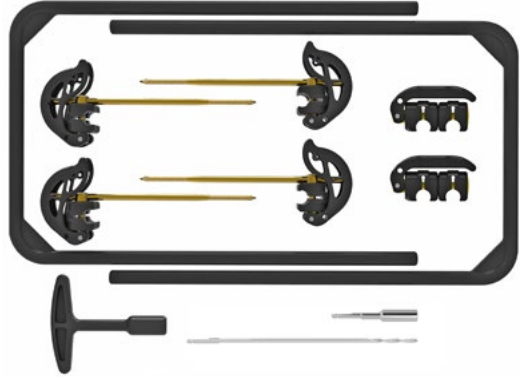

PK-025 | Set quirúrgico Diáfisis de miembros inferiores Dolphix con tornillos óseos Estándar

D SET
PK-025



PK-024 | Set quirúrgico Delta Frame Dolphix con tornillos óseos Estándar

Δ SET
PK-024




EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

CON LOS SET QUIRÚRGICOS

Fijación externa
temporal
rápida, segura
ar

- ✓ Abrazadera con tornillo óseo Estándar de $\varnothing 5\text{mm}$ L. 180-40mm (4 pzs)
- ✓ Abrazadera Barra a Barra (2 pzs)
- ✓ Barra en U $\varnothing 12\text{mm}$ L. 200x300mm (2 pzs)
- ✓ Mango en T $\varnothing 6\text{mm}$ (1 pz)
- ✓ Adaptador conexión rápida tornillo $\varnothing 6\text{mm}$ (1 pz)
- ✓ Punta perforador $\varnothing 3.2 \times 195\text{mm}$ (1 pz)

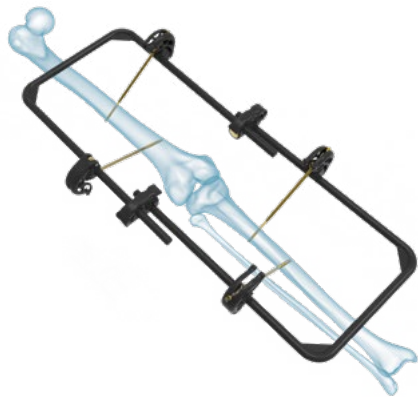

Estándar de $\varnothing 5\text{mm}$

- ✓ Abrazadera con tornillo óseo Estándar de $\varnothing 5\text{mm}$ L. 180-40mm (4 pzs)
- ✓ Abrazadera Barra a Barra (2 pzs)
- ✓ Barra $\varnothing 12\text{mm}$ L. 200mm (3 pzs)
- ✓ Mango en T $\varnothing 6\text{mm}$ (1 pz)
- ✓ Adaptador conexión rápida tornillo $\varnothing 6\text{mm}$ (1 pz)
- ✓ Punta perforador $\varnothing 3.2 \times 195\text{mm}$ (1 pz)



- ✓ Abrazadera con tornillo óseo Estándar de $\varnothing 5\text{mm}$ L. 180-40mm (4 pzs)
- ✓ Abrazadera con tornillo óseo Estándar de $\varnothing 4\text{mm}$ L. 120-30mm (1 pz)
- ✓ Tornillo óseo Pasante $\varnothing 7\text{mm}$ L. 260mm con 2 abrazaderas (1 pz)
- ✓ Abrazaderas Barra a Barra (3 pzs)
- ✓ Barra $\varnothing 12\text{mm}$ L. 150mm (1 pz)
- ✓ Barra $\varnothing 12\text{mm}$ L. 300mm (3 pzs)
- ✓ Mango en T $\varnothing 6\text{mm}$ (1 pz)
- ✓ Adaptador conexión rápida tornillo $\varnothing 6\text{mm}$ (1 pz)
- ✓ Punta perforador $\varnothing 3.2 \times 195\text{mm}$ (1 pz)



ral
tura
and estable



SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA TEMPORAL

- Set quirúrgico estéril listo para usar
- No necesita instrumental
- Armado intuitivo y bloqueado manualmente
- Fácil de manejar para una reducción indirecta
- Control de daños estable
- Amplia visibilidad y acceso a la zona afectada para pasar a un tratamiento definitivo
- Fijador modular para numerosas configuraciones distintas con pocos componentes
- Posición y inmovilización cómoda para el paciente

Los fijadores externos temporales Dolphix® están indicados en la construcción de un fijador externo para el tratamiento de fracturas de huesos largos y pelvis, de fracturas de articulaciones y pilon tibial que requieren fijación externa.





MR Conditional

Dolphix con un campo magnético estatico de 1.5 T se puede utilizar sin peligro hasta 60 minutos.

Dolphix con un campo magnético estatico de 3 T se puede utilizar sin peligro hasta 15 minutos.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN - COMPONENTES INDIVIDUALES

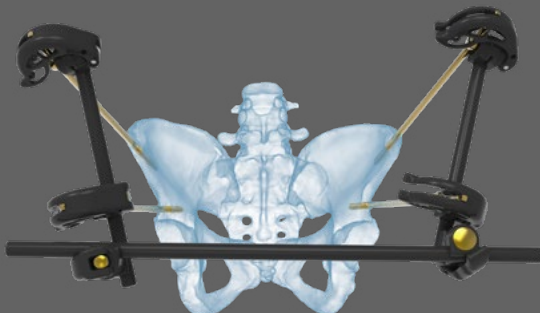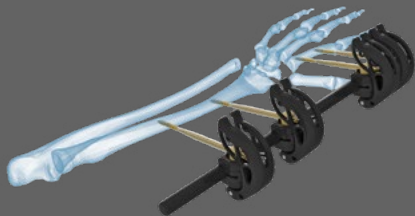

COMPONENTES DEL SISTEMA

Abrazadera Dolphix

- ✓ Solo una abrazadera de bloqueo manual para todos los tipos de tornillo óseo



Abrazadera Barra a Barra

- ✓ Bloqueo manual de forma rápida y comprobable a simple vista



Barra radiotransparente \varnothing 12mm

- ✓ Longitudes disponibles desde 150mm hasta 650mm



Barra radiotransparente en U \varnothing 12mm

- ✓ Su diseño en forma de U facilita el tratamiento definitivo posterior al control de daños



Barra radiotransparente en L \varnothing 12mm

- ✓ 2 longitudes distintas: 70x250mm y 100x300mm



Tornillo óseo Estándar

- ✓ Tornillo de titanio con rosca de diámetro uniforme y punta roma
- ✓ 3 diámetros distintos y 3 longitudes



Tornillo óseo Damage Control

- ✓ Tornillo de titanio con rosca de triple diámetro, autoroscante y autoroscante
- ✓ 3 roscas de triple diámetro distintas y 4 longitudes



Tornillo óseo Pasante

- ✓ Tornillo de titanio con rosca intermedia



Todos los componentes disponibles estériles en set quirúrgicos o presentación individual para un uso único. Fácil de montar y configurar.



Sistema de fijación externa temporal

citieffe®
Essential Moves in Trauma

INSPIRED BY PEOPLE
MOVED BY INNOVATION

 Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com

www.citieffe.com

SU DISTRIBUIDOR ES