

ST.A.R.90 F4 Codo

Fijador externo articulado



Fijador externo estable unilateral

Flexión y extensión controlada

Fácil de usar, discreto

*Movimiento guiado del codo
de manera estable*

citiéffe[®]
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citiéffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citiéffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citiéffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citiéffe en su área.

ST.A.R.90 F4 Codo

ST.A.R.90 F4 Codo

Lesiones agudas del ligamento o de la articulación del codo (dislocaciones inestables, fracturas inestables, fracturas multi fragmentarias relacionadas con una osteosíntesis interna), lesiones crónicas articulares del codo (inestabilidad del codo y rigidez).

- ✓ Fijador del codo Universal y Unilateral (Derecho e Izquierdo)
- ✓ Posicionamiento versátil de los tornillos óseos
- ✓ Tornillos óseos corticales autoperforantes de doble diametro
- ✓ Distracción articular controlada micrométricamente

Componente articular radiotransparente para una visualización óptima con rayos X



Caso clínico

Dislocación de la fractura

Por cotesía de Dr. P. Gabellieri
U.O. Ortopedia e Traumatología
Ospedale civile di Cecina (LI)



Pre-op



Post-op



Remoción del fijador


Referencias bibliográficas

Maniscalco P, Pizzoli AL, Renzi Brivio L, Caforio M. Hinged external fixation for complex fracture-dislocation of the elbow in elderly people. Injury. 2014 Dec;45 Suppl 6:S53-7.

Optional accessories

Limitador de R.O.M. fijador codo

Accesorio radiotransparente que permite una flexo-extensión controlada de la articulación.

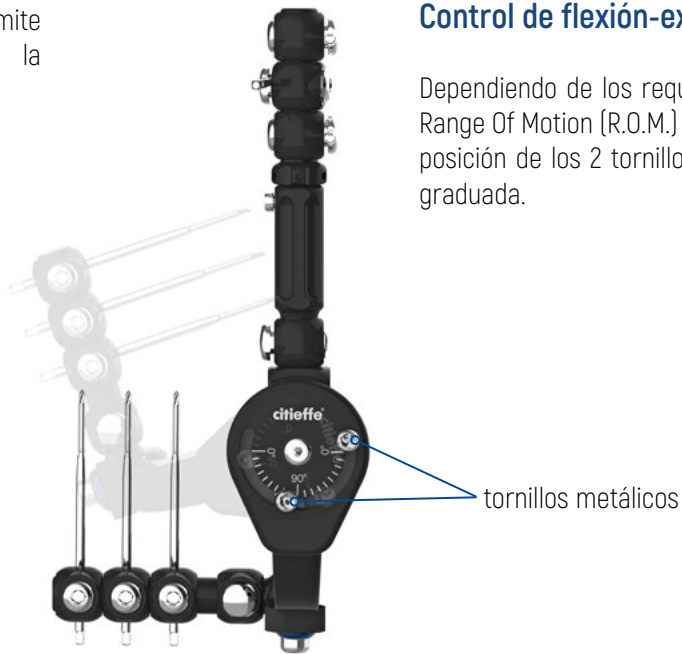

Control de flexión-extensión

Dependiendo de los requisitos de tratamiento, el Range Of Motion (R.O.M.) viene determinado por la posición de los 2 tornillos metálicos en la escala graduada.

Dispositivo de flexión-extensión

Accesorio que le permite forzar el movimiento de la articulación del codo.



Flexión-extensión inducida

Indicado en casos de rigidez o deficit en la extensión y se utiliza con ayuda de ejercicios de fisioterapia.

Extension

Permite la extensión distal de la colocación de los tornillos oseos cubital hasta 7cm más de manera distal.



Extensión distal de los tornillos cubitales

Está indicado para todos los casos en que eventualmente otros sistemas de fijación interna o zonas de estrés de los tejidos blandos impidieran la introducción de tornillos óseos de cúbito en las abrazaderas estándar.

ST.A.R.90 F4 Codo

Fijador externo articulado

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

INSPIRED BY PEOPLE
MOVED BY INNOVATION



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

SU DISTRIBUIDOR ES



CE
0476