


PRESENTATION HORUS TMC



Prothèse trapézo-métacarpienne (PTM)

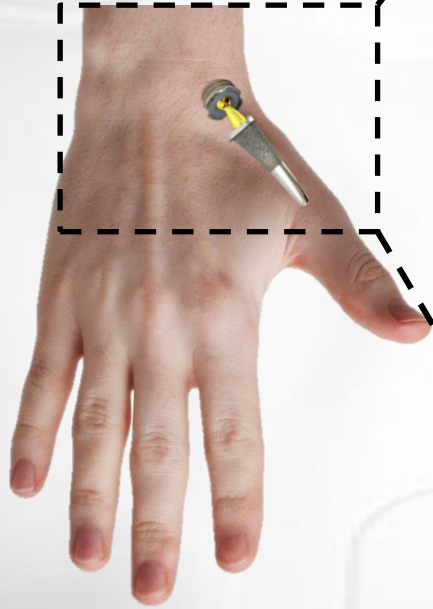

INDICATIONS

La prothèse HORUS TMC est indiquée pour les lésions trapézo-métacarpienne arthrosiques (rhizarthrose) chez le patient âgé de plus de 60 ans et actif, n'utilisant pas intensivement l'articulation du pouce ni professionnellement ni dans les loisirs.

Le trapèze doit avoir conservé une hauteur suffisante pour permettre l'insertion de la cupule trapéziennne sans fragilisation des murs corticaux. Un trapèze inférieur à 8mm est une contre-indication stricte à la PTM.

GAMME TRAPEZIENNE

Cupule trapézienne sans ciment

Titane revêtu T40



Insert pour cupule trapézienne

PE XLPE Vitaminé E



Cupule trapézienne à cimenter

PE XLPE Vitaminé E



INSTRUMENTATION TRAPEZIENNE

Jeu de couleurs par taille


Cupule d'essai sans ciment



Insert d'essai pour cupule sans ciment




Cupule d'essai à cimenter

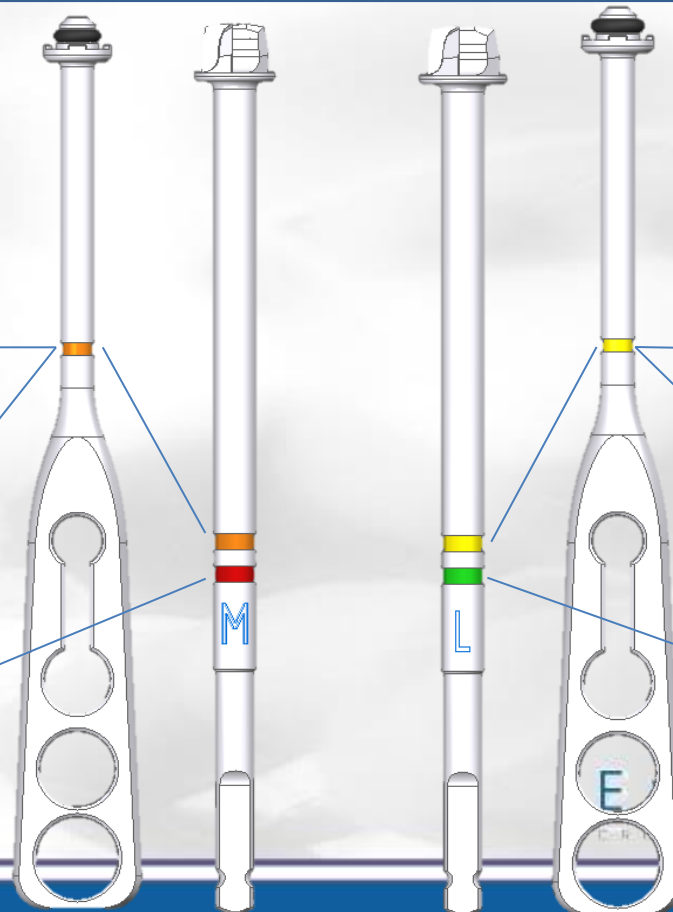

TETES METACARPIENNES

Cols modulaires
Ø tête : 5mm
CoCr poli revêtu TiN

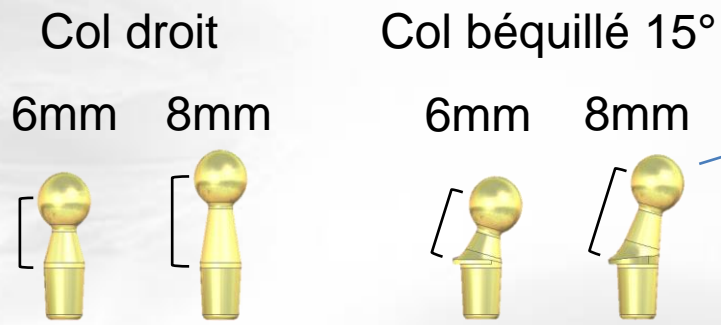


TIGES METACARPIENNES

5 Tailles
Titane revêtu T40




ANCILLAIRE HORUS TMC

17 cm

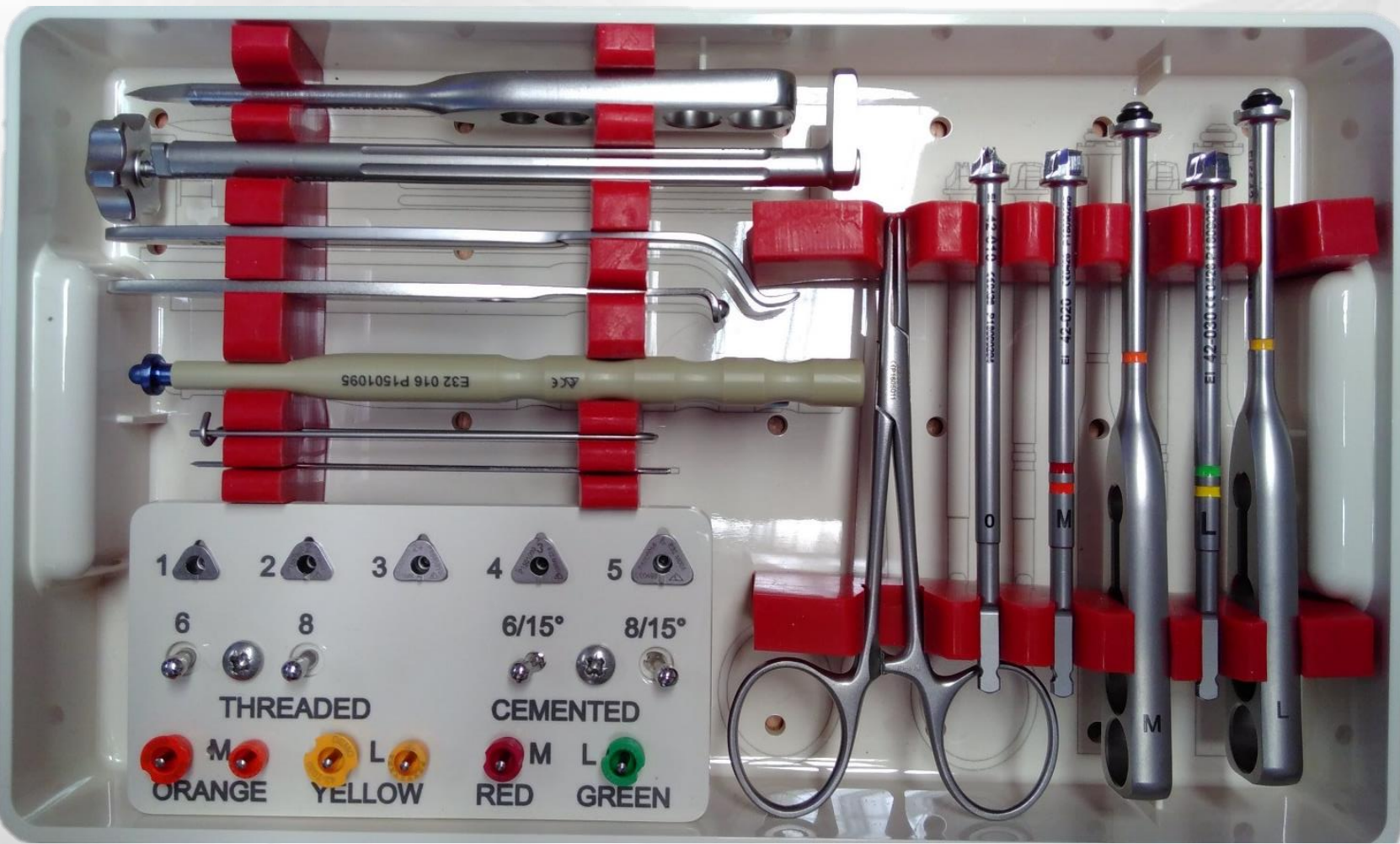

29 cm

ANCILLAIRE DE REVISION

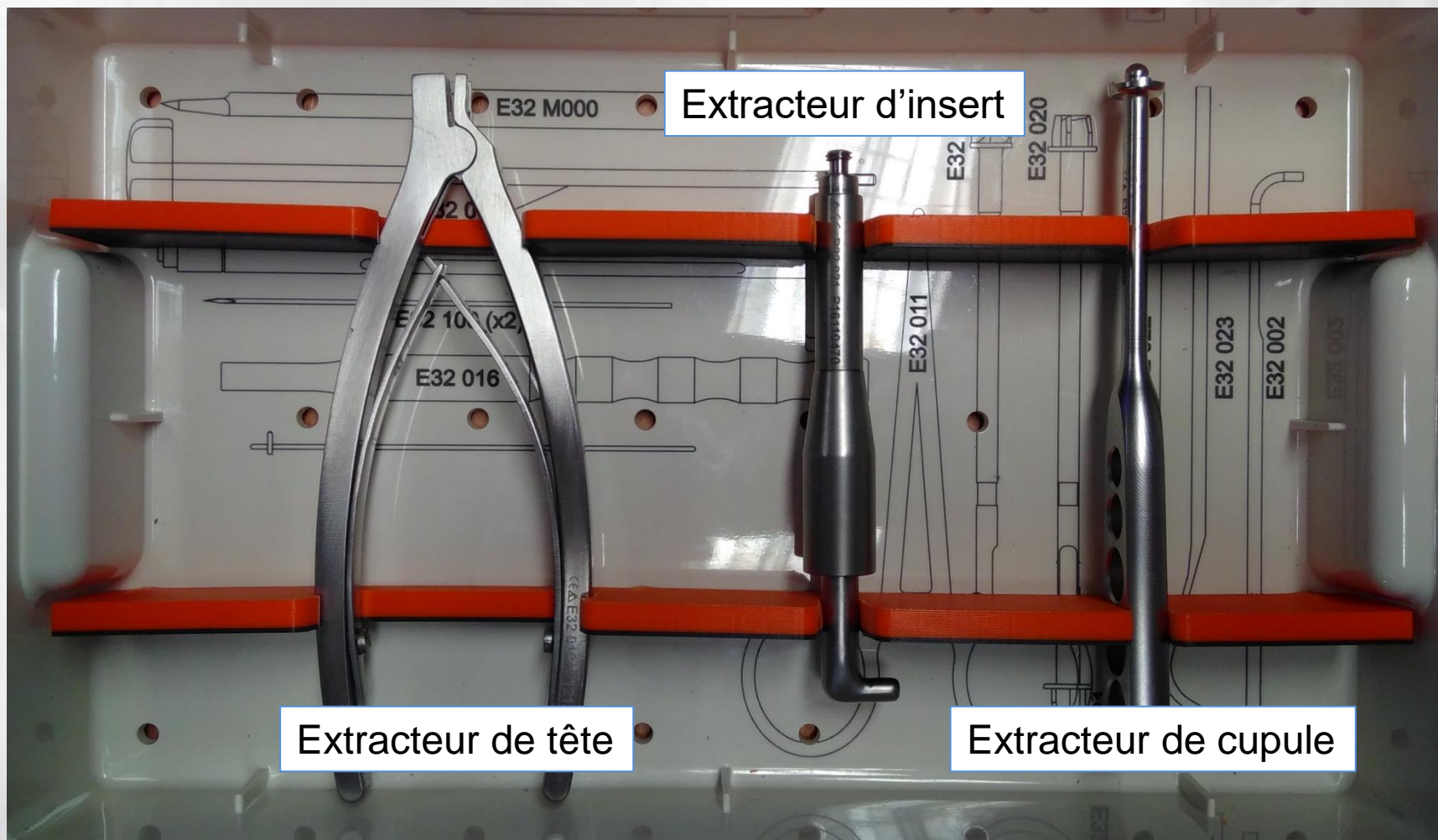

Extracteur d'insert

Extracteur de tête

Extracteur de cupule

SYNOPTIQUE

19	1	IMPACTEUR DE RAPE ET IMPLANT METACARPIEN (VIS) METACARPAL RASP AND IMPLANT IMPACTOR (SCREW)	PE320091	E32 025	29	1	INSERT D'ESSAI POUR CUPULE TAILLE L TRIAL LINER FOR L SIZE CUP	PE360056	E36 1030
18	1	ECARTEUR DE TRAPEZE RETRACTOR FOR TRAPEZIUM	PE320054	E32 023	28	1	INSERT D'ESSAI POUR CUPULE TAILLE M TRIAL LINER FOR M SIZE CUP	PE360055	E36 1020
17	1	POUSOIR DE TRAPEZE A CEMENTER A MANCHE DECALE OFFSET CEMENTED CUP PUSHER	PE320042	E32 002	28	1	PANIER ANCILLAIRE HORUS TMC INSTRUMENT TRAY HORUS TMC	PE360033	E36 9000
16	1	IMPACTEUR ORIENTEUR POUR PE TRAPEZIEN IMPACTOR FOR PE TRAPEZIUM LINER	PE320027	E32 018	27	1	CLE POUR CUP. TRAPEZ. VISSEE L SCREWDRIVER FOR TRAPEZIUM CUP LARGE	PE360024	E36 130
15	1	IMPACTEUR DE TETE METACARPIENNE NECK IMPACTOR	PE320018	E32 016	26	1	CLE POUR CUP. TRAPEZ. VISSEE M SCREWDRIVER FOR TRAPEZIUM CUP MEDIUM	PE360023	E36 120
14	2	BROCHE DE GUIDAGE ϕ 1.25 L100 GUIDE WIRE ϕ 1.25 L100	PE360021	E36 008	25	1	FRAISE DE TRAPEZE L TRAPEZIUM REAMER LARGE	PE360031	E36 030
13	1	CUPULE TRAPEZIENNE D'ESSAI L A CEMENTER CEMENTED TRIAL CUP LARGE	PE360028	E36 T130	24	1	FRAISE DE TRAPEZE M TRAPEZIUM REAMER MEDIUM	PE360030	E36 020
12	1	CUPULE TRAPEZIENNE D'ESSAI M A CEMENTER CEMENTED TRIAL CUP MEDIUM	PE360027	E36 T120	23	1	FRAISE D'EBAUICHE TRAPEZIENNE STARTER REAMER	PE360029	E36 010
11	1	CUPULE TRAPEZIENNE D'ESSAI L SANS CIMENT CEMENTLESS TRIAL CUP LARGE	PE360026	E36 T030	22	1	PREHENSEUR DE TETE META. METACARPAL NECK GRASPER	PE320043	E32 011
10	1	CUPULE TRAPEZIENNE D'ESSAI M SANS CIMENT CEMENTLESS TRIAL CUP MEDIUM	PE360025	E36 T020	21	1	TROCARD DE DEMARRAGE STARTER AWL	PE320048	E32 M000
9	1	TETE METACARPIENNE D'ESSAI COL DECALE LG8mm ϕ 5MM TRIAL HEAD 15° OFFSET LG 8MM	PE320058	E32 M158	20	1	IMPACTEUR DE RAPE ET IMPLANT METACARPIEN (CORPS) METACARPAL RASP AND IMPLANT IMPACTOR (SHAFT)	PE320087	E32 024
8	1	TETE METACARPIENNE D'ESSAI COL DECALE LG6mm ϕ 5MM TRIAL HEAD 15° OFFSET LG 6MM	PE320059	E32 M156	N°	Qté	Designation	N° de plan Drawing number	Reference
7	1	TETE METACARPIENNE D'ESSAI COL DROIT LG 6MM ϕ 5MM TRIAL HEAD STRAIGHT LG 8MM	PE320057	E32 M008					
6	1	TETE METACARPIENNE D'ESSAI COL DROIT LG 6MM ϕ 5MM TRIAL HEAD STRAIGHT LG 6MM	PE320057	E32 M006					
5	1	RAPE METACARPIENNE T5 METACARPAL RASP S5	PE360005	E36 M005					
4	1	RAPE METACARPIENNE T4 METACARPAL RASP S4	PE360004	E36 M004					
3	1	RAPE METACARPIENNE T3 METACARPAL RASP S3	PE360003	E36 M003					
2	1	RAPE METACARPIENNE T2 METACARPAL RASP S2	PE320013	E32 M002					
1	1	RAPE METACARPIENNE T1 METACARPAL RASP S1	PE320012	E32 M001					
N°	Qté	Designation	N° de plan	Reference					
	Qty		Drawing number						

